


GEBRAUCHSANWEISUNG SLEEVE

Hinweise

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen des Modells führen.
- Bei Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen kann die Oberfläche des Modells beschädigt werden.
- Durch zu starkes Dehnen und Ziehen kann der Sleeve beschädigt werden.

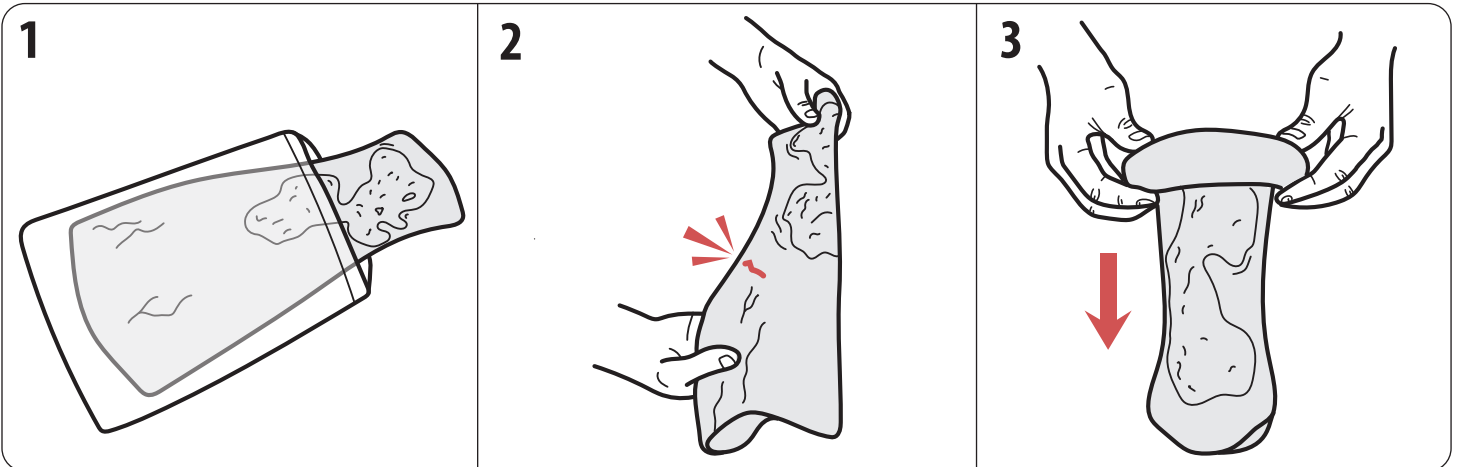


Nehmen Sie den Sleeve vorsichtig aus der Verpackung. Der Sleeve wird in einem PVC-Beutel ausgeliefert. Diesen können Sie zur weiteren Lagerung verwenden, die Lagerung im Baumwollbeutel reicht jedoch aus.

Überprüfen Sie das Modell auf sichtbare Schäden. Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

info@medicalfx.de

Am leichtesten lässt sich der Sleeve anlegen, indem man ihn abrollt. Rollen Sie dazu zuerst den Sleeve von oben (breiteres Ende) nach unten auf. Es entsteht ein relativ dicker runder Kranz, bei dem die Innenseite des Sleeves das Äußere bildet.

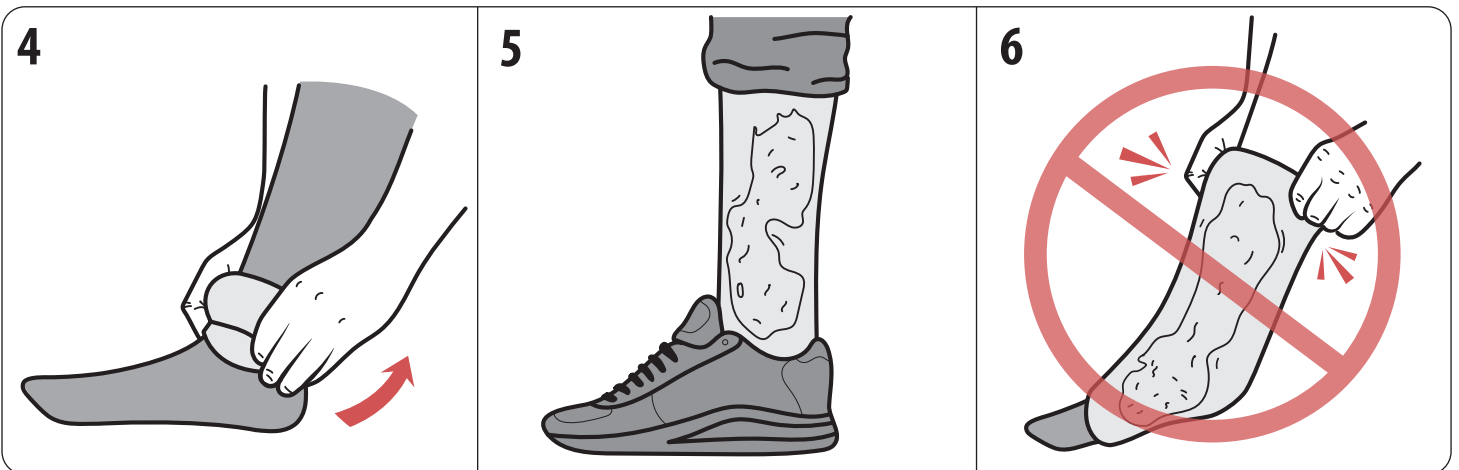

Führen Sie den Fuß der Übungspuppe durch das Loch in der Mitte dieses Kranzes, bis er ungefähr auf dem Knöchel sitzt. Nun können Sie den Sleeve nach oben auf den Unterschenkel abrollen.

Sie können die Enden des Sleeves (Knie, Knöchel) mit Tüchern, Kleidung oder Ähnlichem kaschieren, um eine möglichst realistische Darstellung zu erzielen.

Bitte versuchen Sie nicht, den Sleeve wie einen zu engen Strumpf gewaltsam über das Bein zu ziehen. Der Sleeve kann dadurch beschädigt werden.

Um das Anziehen zu erleichtern können Sie die Innenseite des Sleeves bei Bedarf mit etwas Babypuder bestäuben.

Pflege und Lagerung

Reinigung

- Reinigen Sie das Modell bei Bedarf mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und Seife.
- Verwenden Sie keine scharfen Haushaltsreinigungsmittel, die das Material angreifen könnten.
- Zur Entfernung von Klebe- und Pflasterresten können Sie Desinfektionsmittel oder Reinigungsalkohol verwenden.
- Lassen Sie den Sleeve an der Luft trocknen, bevor Sie ihn lagern oder erneut verwenden.

Lagerung

- Verstauen Sie das Modell im mitgelieferten Baumwollbeutel.
- Bewahren Sie das Modell an einem trockenen und kühlen Ort auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen.

Probleme und Lösungen

Problem	Lösung
Der Sleeve sitzt nicht richtig	Rollen Sie den Sleeve von oben über den Unterschenkel der Übungspuppe ab, versuchen Sie dann ihn erneut aufzurollen. Setzen Sie dabei entsprechend höher/tiefer an als zuvor, oder verdrehen Sie den Sleeve entsprechend, wenn dieser nicht gerade auf dem Bein anlag.
Sichtbare Schäden am Sleeve	Kontaktieren Sie den Kundenservice für eine mögliche Reparatur oder Austausch. Übermitteln Sie am besten Fotos der Schäden.

Sollten Sie weitere Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter info@medicalfx.de

Technische Daten

Material	Hochwertiges, hautähnliches Silikon
Abmessungen	ca. 39 × 16 × 5 cm; Passend für durchschnittliche Unterschenkelgrößen
Gewicht	ca. 630g
Kompatibilität	Geeignet für den Einsatz mit allen gängigen Verbandmaterialien und Wundversorgungsprodukten

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Modell wertvolle Dienste bei Ihrer Arbeit leistet. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ihr MEDICAL FX Germany Team

Herstellerinformationen

MEDICAL FX Germany GmbH - Inh. Nicholas Krützfeldt


Webseite: medicalfx.de

Kundenservice: info@medicalfx.de

SLEEVE INSTRUCTIONS

Important Information

- Read the instructions thoroughly before using the product.
- Improper handling may damage the model.
- Contact with sharp or hot objects may damage the surface of the model.
- Excessive stretching and pulling may damage the sleeve.

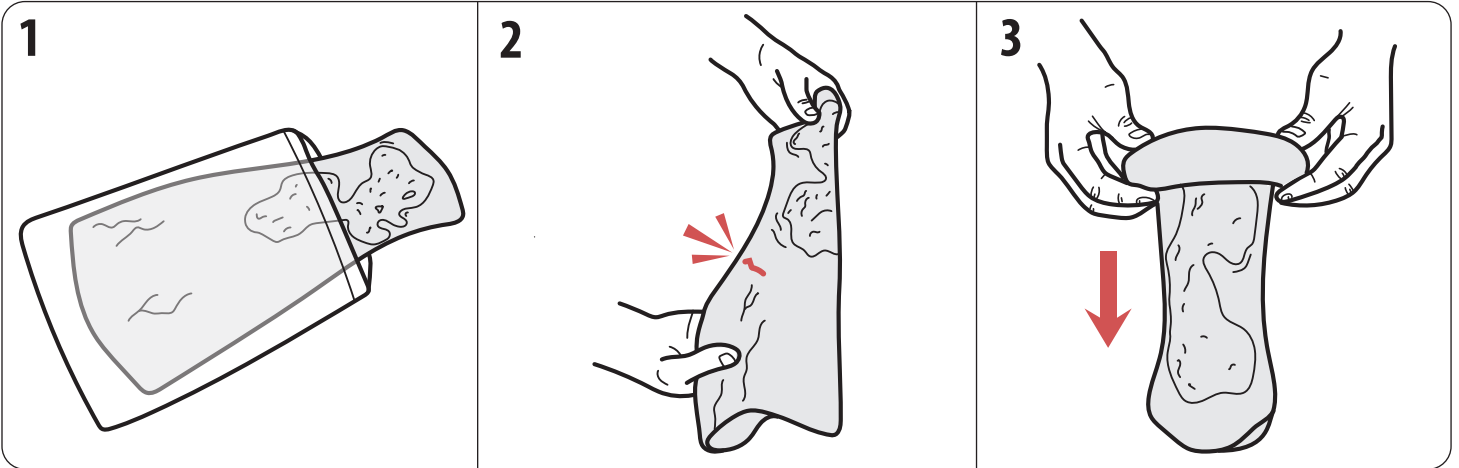

Carefully remove the sleeve from the packaging. The sleeve is delivered in a PVC bag. You can use it for further storage, but storage in the cotton bag is sufficient.

Check the model for visible damage. If you notice any damage, please contact our customer service department:

info@medicalfx.com

The easiest way to put on the sleeve is to roll it onto the lower leg. To do this, first roll the sleeve from the top (wider end) to the bottom. This creates a relatively thick, round ring, with the inside of the sleeve forming the outside.



Place the ring opening over the foot of the practice dummy and guide it up to the ankle. Then gently roll the sleeve upward along the lower leg until it is in position.

You can conceal the ends of the sleeve (knees, ankles) with cloths, clothing, or similar items to achieve an even more realistic appearance.

Please do not try to force the sleeve over the leg like a tight stocking. This could damage the sleeve.

To make it easier to put on, you can dust the inside of the sleeve with a little bit of baby powder if necessary.

Maintenance and Storage

Cleaning

- Clean the model as needed with a soft cloth, warm water, and soap.
- Do not use harsh household cleaners that could damage the material.
- You can use disinfectant or rubbing alcohol to remove adhesive and paste residue.
- Allow the sleeve to air dry before storing or reusing it.

Storage

- Store the model in the cotton bag provided.
- Keep the model in a dry and cool place.
- Avoid direct sunlight and extreme temperatures.

Problems and Solutions

Problem	Solution
The sleeve doesn't fit properly	Roll the sleeve down the lower leg of the dummy from the top, then try to roll it up again. Start higher/lower than before, or twist the sleeve accordingly if it did not fit straight on the leg.
Visible damage to the sleeve	Contact customer service for a possible repair or replacement. Please provide photos of the damages.

If you have any further problems or questions, please contact our customer service department at info@medicalfx.de.

Technical Data

Material	High-quality, skin-like silicone
Measurements	Approx. 39 × 16 × 5 cm; Suitable for average sized lower legs
Weight	Approx. 630g
Compatibility	Suitable for use with all common dressing materials and wound care products

We hope this model will be of valuable service to you in your work. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us. We are always available to assist you.

Your MEDICAL FX Team Germany

Manufacturer Information

MEDICAL FX Germany GmbH - CEO. Nicholas Krützfeldt

Website: medicalfx.de

Customer Service: info@medicalfx.de